


CÓMO CONFIGURAR STIMULUS® PRO PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN **TRABAJAR EN CASA**.


Existen dos opciones para que los usuarios puedan trabajar desde casa, dependiendo del equipamiento con el que cuente (tablet o computador).


A. Acceso a través de Tablet, ya use S.O. Android o iOS (iPad).

- 1) En primer lugar, el paciente (o el familiar/cuidador en su defecto) deberá descargar en el dispositivo la APP “**Stimulus® HOME**”.
- 2) Tras ello deberá registrar una cuenta (es gratuito), para lo que simplemente es necesario disponer de una cuenta de correo electrónico válida. Pulsando el botón “**IDENTIFICACIÓN DE USUARIO**” que aparece en la pantalla principal:

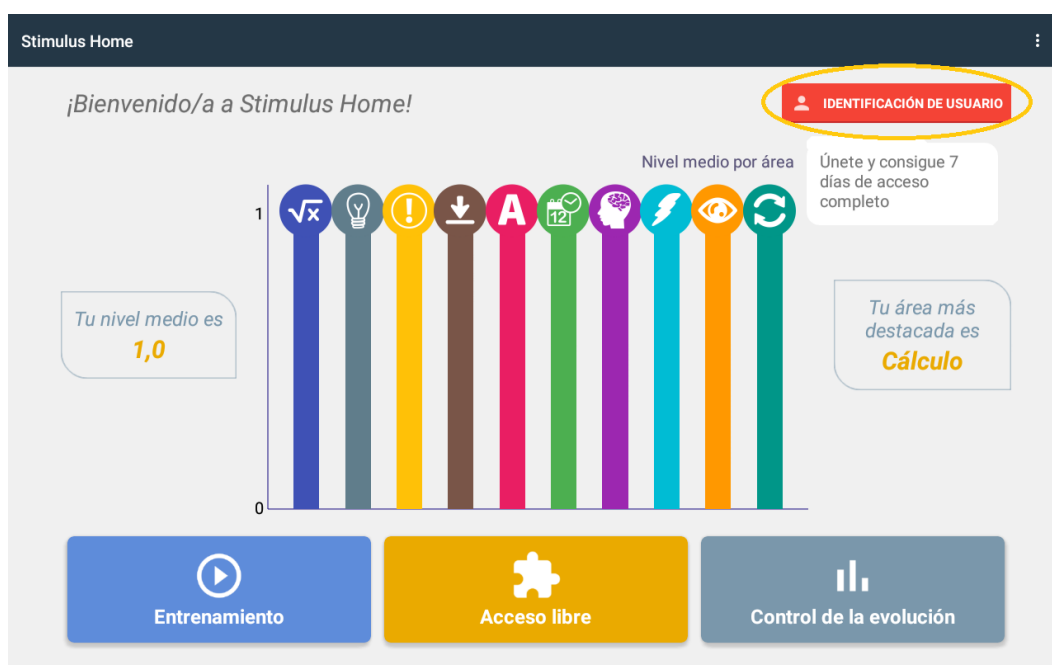


- 3) Le aparecerá el siguiente formulario:

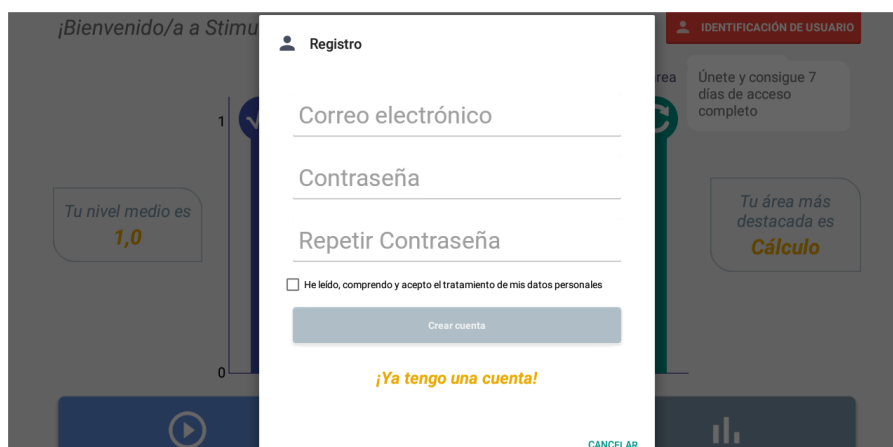

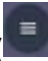
- 4) Tras ello, recibirá un correo el usuario para validar la cuenta. Y a partir de ahí podrá acceder con esa cuenta a Stimulus® HOME. Es entonces cuando debe facilitarte la cuenta (dirección de correo electrónico).
- 5) Por último, debes vincular la cuenta HOME. Debes acceder a través de la web (<https://stimuluspro.com> “**acceso clientes**”) e introducir tus credenciales de acceso. Luego, debes ir a la opción de menú “usuarios”. Deberás seleccionar el correspondiente y aparecerá en la cabecera un botón () que desplegará 4 opciones. Entre ellas una que indica “Vincular cuenta Home”:



Tras pulsar esa opción aparecerá un diálogo donde pide introducir la cuenta HOME a asociar:

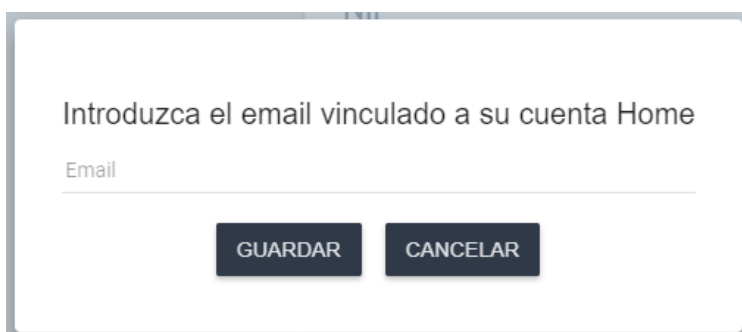


Tras pulsar “Guardar”, se realizará el proceso, y se mostrará resultado del mismo:

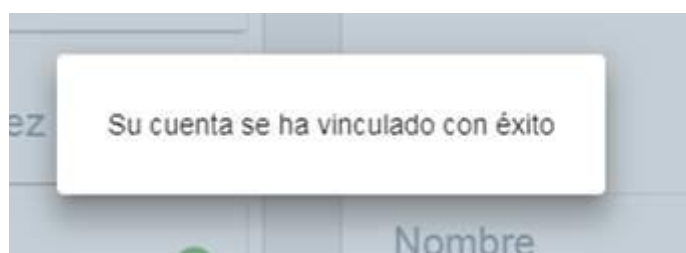


B. A través de WEB, desde cualquier computador, PC o Mac.

(NOTA IMPORTANTE, para esta opción debéis solicitarnos previamente que habilitemos el acceso web, ya que por defecto no lo está).

- 1) En este caso, el que inicia el proceso eres tú (el profesional). Para ello debes ir al portal web y seleccionar el usuario, tal y como en el paso "5" del caso anterior. Una vez allí, verás que en la parte superior de la tarjeta donde se muestra la información del usuario (a la izquierda de la foto), hay botón que indica "ACCESO PRIVADO":

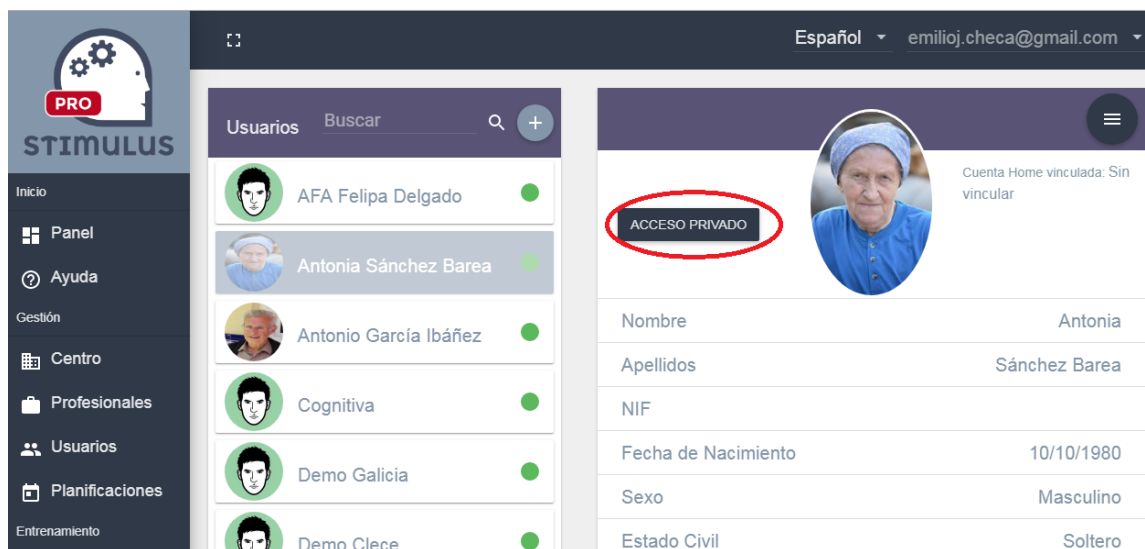


- 2) Tras pulsar ahí, aparecerá un nuevo formulario donde le pedirá introducir la clave de acceso por duplicado:

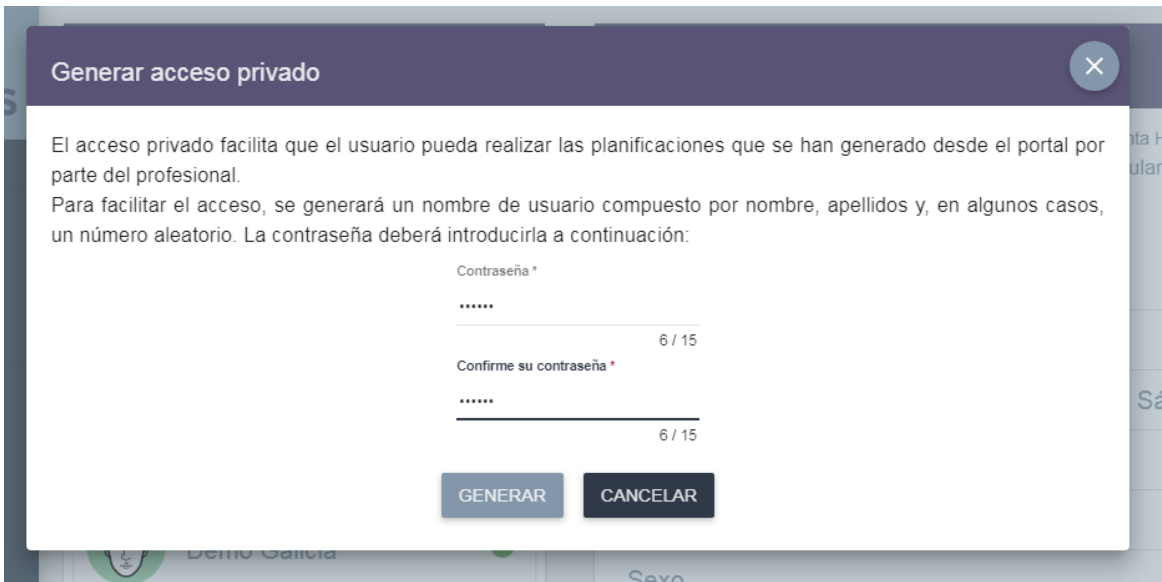

The screenshot shows a modal window titled 'Generar acceso privado'. It contains the following text: 'El acceso privado facilita que el usuario pueda realizar las planificaciones que se han generado desde el portal por parte del profesional. Para facilitar el acceso, se generará un nombre de usuario compuesto por nombre, apellidos y, en algunos casos, un número aleatorio. La contraseña deberá introducirla a continuación:'. Below the text are two password input fields, each with a strength indicator '6 / 15'. The first field is labeled 'Contraseña *' and the second is labeled 'Confirme su contraseña *'. At the bottom of the modal are two buttons: 'GENERAR' and 'CANCELAR'.

- 3) Cuando pulse “GENERAR”, aparecerá un cuadro resumen con los datos que deberá enviar al usuario para su acceso (en el caso del ejemplo este sería el usuario / contraseña: antonia.sánchez / prueba):

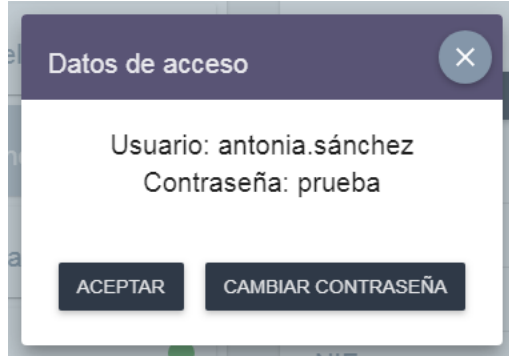

Datos de acceso

Usuario: antonia.sánchez
Contraseña: prueba

ACEPTAR CAMBIAR CONTRASEÑA

- 4) Luego, el usuario deberá acceder en la siguiente dirección, que le deberás facilitar https://stimulus.mobi/user_access/app/ y donde usará esos datos de acceso que le has facilitado:



Acceso privado para usuarios

Español

STIMULUS

Usuario *
antonia.sánchez

Contraseña *

INICIAR SESIÓN

Panel de control web para la app Stimulus
© Software DELSOL

- 5) Una vez acceda, verá información genérica sobre su actividad, sus datos personales y sobre todo, podrá pulsar en “comenzar entrenamiento” para que realizar la sesión personalizada que le hayas creado:



The screenshot displays the Stimulus Pro web application interface. At the top, a dark header bar contains the text "Acceso privado para usuarios" on the left, and language and user selection options "Español" and "antonia.sánchez" on the right. The left sidebar is a dark vertical menu with the Stimulus Pro logo at the top, followed by icons and labels for "Inicio", "Panel", "Ayuda", "Entrenamiento", "Acceso libre", "Resultados", and "Evolución". The main content area is light gray and features two large white boxes at the top: "Actividad" showing a value of "2" for "Ejercicios últimos 30 días", and "Rendimiento" showing a value of "23.57" for "PS últimos 30 días". Below these are two prominent buttons: a red one labeled "COMENZAR ENTRENAMIENTOS" and a blue one labeled "ACCESO LIBRE A EJERCICIOS". On the right side, there is a user profile section with a circular profile picture of an elderly woman and a table of personal data.

Nombre	Antonia
Apellidos	Sánchez Barea
NIF	
Fecha de Nacimiento	09/10/1980
Sexo	Masculino
Estado Civil	Soltero

https://stimulus.mobi/user_access/app/#/improvements